

MC 11



Abdominal belt
Ζώνη Κοιλίας

EN | Instructions for Use

ΕΛ | Οδηγίες Χρήσης

If you have any doubts regarding the applications and use of this medical device, do not hesitate to ask your doctor and / or fitter, pharmacist, orthotist, or orthopedic consultant for advice.

FEATURES

- Simple construction, easy to put on and take off
- Discreet fit underneath clothing
- Can be used as a waist trimmer
- Made of lightweight Neoprene that retains heat, with perforated parts to improve breathability and sweat management during activity
- Hook & Loop fasteners, allow lots of adjustability for customized fit
- Minimal, clean design and highly durable

PERFORMANCE

This belt provides mild compression and support for weak and strained abdominal muscles resulting from injury, exhaustion and inactivity.

INDICATIONS

Recommended for:

- Post-surgical or post-natal management, including Liposuction, Cesarean or Hysterectomy
- Relieving pain and strain in abdominal muscles
- Improving circulation and encouraging quicker recovery of abdominal injuries or post-surgery

WARNINGS. PRECAUTIONS OF USE

Do not use the product if you are allergic to any of its components. This product is not an alternative to medical care. Seek professional medical advice for the diagnosis and treatment of pain, injury or irritation.

SET UP AND OPERATION

- Place the belt around your waist (as shown in the picture).
- Position in the desired height.
- Adjust the hook & loop fasteners to fit tightly yet comfortably around your abdomen/lower back.

CARE INSTRUCTION

- Make sure to secure all hook and loop fasteners before washing, so they don't stick to other fabrics.
- Machine wash at low-temperature and gentle spin or hand-wash with lukewarm water and soft detergent.
- Do not tumble dry, dry clean, use bleach or fabric softeners.

MEASUREMENT AND SIZE CHART

The size is to choose in accordance with the waist circumference, measured 2 cm above the iliac crests (in cm)

	S/M	L/XL
	75 - 95	95 - 115

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις εφαρμογές και τη χρήση αυτού του προϊόντος μην διστάσετε να ζητήσετε τη συμβουλή του ορθοπεδικού, ιατρού ή / και του φαρμακοποιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απλή κατασκευή, εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση.
- Διακριτική εφαρμογή κάτω από τα ρούχα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κορσές.
- Κατασκευασμένη από ελαφρύ νεοπρένιο που συγκρατεί τη θερμότητα, με διάτρητα μέρη για βελτίωση της διαπνοής και διαχειρίσις του ιδρώτα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.
- Minimal design με μεγάλη ανθεκτικότητα και εύκολη προσαρμογή.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Παρέχει ήπια συμπίεση και υποστήριξη στους αδύναμους και καταπονημένους κοιλιακούς μύες που προκαλούνται από τραυματισμό, εξάντληση και αδράνεια.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Χρήση έπειτα από τοκετό ή μετεγχειρητική, συμπεριλαμβανομένων της λιποαναρρόφησης, της καισαρικής ή της υστερεκτομής.
- Ανακούφιση από τον πόνο και την καταπόνηση στους κοιλιακούς μύες.
- Βελτίωση της κυκλοφορίας και ταχύτερη ανάρρωση από κοιλιακούς τραυματισμούς και μετεγχειρητικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην κάνετε χρήση του προϊόντος αν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα συσταικά του. Δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή όπου απαιτείται ιατρική φροντίδα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή από επαγγελματίες για την διάγνωση και αντιμετώπιση του πόνου, τραυματισμών η ερεθισμού.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος σύμφωνα με την περιφέρεια της μέσης. Η μέτρηση να πραγματοποιείται 2 εκατοστά πάνω από τη λεκάνη (λαγόνια λοφία).

	S/M	L/XL
	75 - 95	95 - 115

MATERIAL COMPOSITION

82% Neoprene
12% Nylon
6% Polyester

ΣΥΝΘΕΣΗ

82% Νεοπρένιο
12% Nylon
6% Πολυεστέρας


ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Τοποθετήστε τη ζώνη γύρω από την μέση στο επιθυμητό ύψος.
- Τραβήξτε τα πλαινά άκρα ώστε να παρέχουν την επιθυμητή συμπίεση.
- Ασφαλίστε με τα velcro.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Πλένεται στο πλυντήριο σε χαμηλή θερμοκρασία και ήπιο σύψιμο ή στο χέρι με χλιαρό νερό και μαλακό απορρυπαντικό.
- Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό ή μαλακτικό.

MC 11

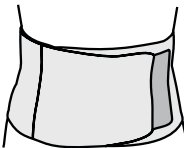

Abdominal belt
Ζώνη Κοιλίας



www.movibrace.com
info@movibrace.com

MB_V1_0000002

